

BIZTONSÁGI GÁZÉGŐ

WLD-TEC

Fuego SCS sorozat - a legmodernebb biztonsági technológiával

Intelligens és alkalmazkodó képes gázégő digitális technikával.

Mikrobiológiai (lamináris fülkékben) és kémiai laborokban történő alkalmazásokra. Eszközök kiizzításhoz és lombikok nyakának leégetéséhez DIN 30665 1 fejezet szabvány szerint, DIN-GVGW NG-2211AR0750 minősítéssel.

Egyszerű kezelés - mikroprocesszoros vezérlés.


Begyűjtés figyelés, láng figyelés, folyamatos égés ellenőrzés, vezérelt égésidő, érzékelő távolság 0-80 mm, túlzítást elleni védelem. Nagyméretű világító digitális LED kijelzés. UV és oldószer ellenálló. Stabil és biztonságos fekvés által tökéletes üzembiztonság. Eszköztartó vájatok a fedél hátsó részén kerültek kialakításra. A kezelő szervek átláthatóan a készülék előlapján helyezkednek el. Beállítható működési idő max. 99 perc. Az égőfej a tisztításhoz levehető.

Másodperces pontossággal beállítható égési idő. A bejövő levegő és gáz rendszer finomszabályzóval ellátott. Egyedi igény szerint beállítható gáz fajta földgáz vagy propán-bután. Az üzemeltetés egyaránt lehetséges vezetékes rendszerről vagy gázpalackról.

3 féle üzemmód lehetséges: IR szenzor - lábtasztatúra - lábkapcsoló.

Tápellátás: 230V 50Hz

Méretetek: 125 x 58 x 155 mm Súly: kb. 1000g

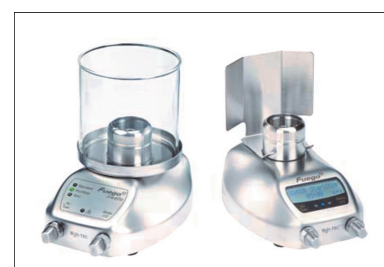

| Rendelési kód | Megnevezés |
|---------------|---|
| 10 307 8001 | Fuego SCS basic, rozsdamentes lábkapcsoló, 2 program |
| 10 307 8000 | Fuego SCS LCD kijelzővel, duplakapcs. IR szenzor, 4 program |
| 10 307 8002 | Fuego SCS pro, mint a fenti plusz szenzor és akku |

Tartozékok:

| Rendelési kód | Megnevezés |
|---------------|--|
| 32 306 6402 | Rozsdamentes lábpedál |
| 10 307 6403 | Mini lábpedál, műanyag, Fuego SCS/pro típushoz |
| 10 307 8404 | Vezeték nélküli rozsdamentes lábpedál vevő egységgel |
| 10 307 8700 | Adapter CV306 gázpalackhoz |
| 32 306 2080 | Adapter C206 gázpalackhoz gázcsővel ¹⁾ |
| 32 306 3085 | Adapter CV270/470 gázpalackhoz gázcsővel ¹⁾²⁾ |
| 32 306 3081 | Adapter CG1750* gázpalackhoz gázcsővel ¹⁾²⁾ |
| | Adapter CG901/904/907* gázpalackhoz |
| 10 318 1303 | Nyomásszabályzó (TÜV bevizsgált) 5 kg/11kg gázpalackokhoz |
| 32 315 1232 | Védőbúra üvegből |
| 32 315 1242 | Légterelő fémből |
| 32 315 1262 | Biztonsági gázcső földgázra 0,75 m |
| 32 315 1272 | Biztonsági gázcső propán-butánra 0,5 m és menetes csatlakozó |
| 32 315 1282 | Biztonsági gázcső propán-butánra 2,0 m és menetes csatlakozó |
| 10 318 1292 | Lombiktartó állvány |
| 32 315 1300 | Szelepes gázpalack CV 360 (6 db x 52g) |
| 10 318 1342 | Szelepes gázpalack CV 470 (3 db x 450g) |
| 10 318 1382 | Szelepes gázpalack Express 444 (6 db x 60g) |
| 10 318 1352 | Menetes szelepes gázpalack CG 1750 (6 db x 175g) |
| 10 318 1372 | Szelepes gázpalack CV 270 (6 db x 230g) |
| 10 318 1382 | Szelepes gázpalack CV 300 (6 db x 240g) |

* tartozék: nyomásszabályzó és 0,5 m biztonsági gázcső.